

枕型頸椎牽引装置

使用説明書

安全にご利用いただくために、必ずご使用前にお読みください。
また、いつでも読めるよう大切に保管しておいて下さい。

目次

用途	1
使用上の注意	2
商品の名称	2
組み立て方	2
使用方法	3
お手入れ方法	4
枕がフィットしない場合	4

用途

頸椎の牽引

使用上の注意

本使用説明書では安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。



警告

誤った使い方をすると、人が重症を負う可能性がある内容



注意

誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容




警告

1. 不快感や痛みが強くなった場合は中止して下さい。
2. スライド板と土台の隙間に指や物を挟まないで下さい。
3. 分解しないで下さい。事故の原因となり得ます。
4. 頸椎牽引以外の目的で使用しないで下さい。
5. 1日の使用時間は30分～8時間を目安としますが、痛みや不快感があれば中止して下さい。

商品の名称


①本体

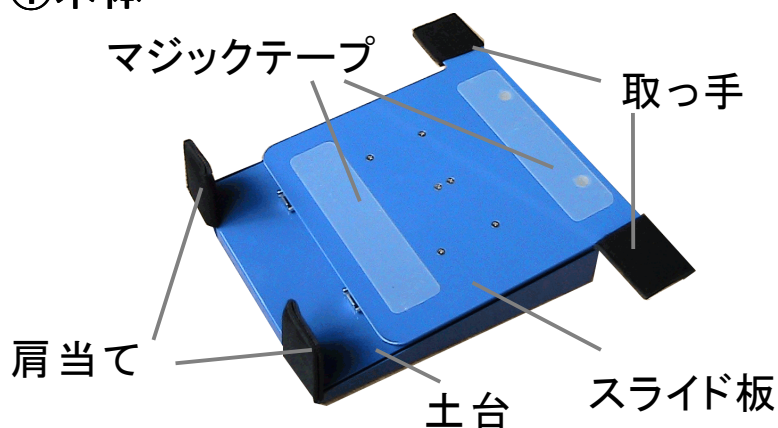

②枕




組み立て方

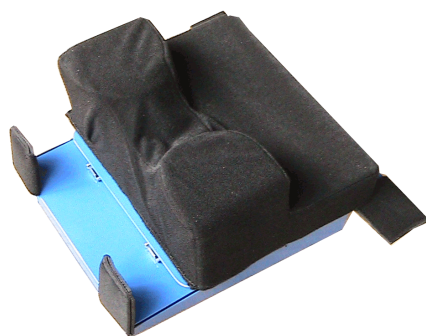

スライド板のマジックテープに枕をくっつけて下さい。写真のように、傾斜が下がっているほうが肩側になります。

使用方法

1. 牽引装置を水平で平らな所へ置いてください。枕にはタオルを1枚敷いてください。
2. 枕牽引の肩当て側に静かに横になってください。肩当てに肩が当たる位置まで体をずらして下さい。

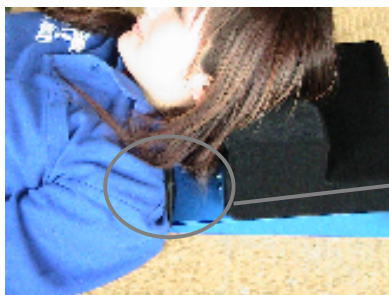

肩当てに肩を当ててください



警告

横になるときは静かに寝てください。肩当てに頭や首が当たり事故の可能性あります。

3. 両手で2つの取っ手を引っ張り、スライド板を体側にスライドさせます。枕に頭が乗るところまで引っ張ってください。



取っ手を持って引っ張ります。



注意

スライド板を引くときに、スライド板と土台の間に指を挟まないよう気をつけて下さい。

4. 手を離すと牽引が開始されます。
5. 枕が引き終わって牽引力がなくなった場合は、また 1.から牽引を始めて下さい。

お手入れ方法

1. 枕カバーは取り外して洗うことができます。洗濯の際は中性洗剤と水で丁寧に手洗いをして、陰干しをしてください。洗濯後はきちんと枕に枕カバーを取り付けてください。



注意

洗濯の際に色落ちや他の生地に色移りする可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないで下さい。

2. 土台を掃除するときは空タオルで軽く拭いて下さい。シンナー類は使用しないで下さい。塗装がはがれる原因となります。

枕がフィットしない場合

枕が小さくてきつく感じる場合は、枕カバーを外し、枕のスポンジをカッター等で切断して幅を調整してください。

枕が大きすぎる場合や自分で調整が難しいと思われる場合は、弊社へ枕を送ってください。こちらで調整致します。

商品のお問い合わせは下記までお願いします。

株式会社 長崎かなえ

住所：長崎県長崎市坂本 1 丁目 6-10

TEL:095-845-6255